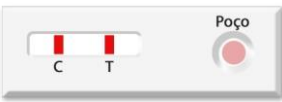
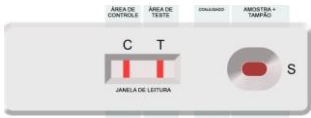
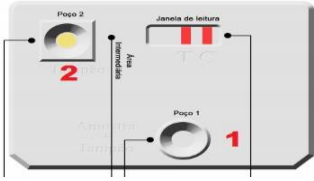


GUIA DE BOLSO – TESTES RÁPIDOS

Elaboração: Cesar Roberto CRF-RJ: 7461 :: CMS Santa Maria

Atualização: 09/10/2019

Revisão: Camilla Barros – Farmacêutica/SMS – Gerência das Áreas Técnicas de IST/Aids e Hepatites Virais

Teste	Marca	Dispositivo (Cassete)	Procedimento	Tempo Leitura	Observações
Hepatite B	Bioclin		Colocar 75 µL de sangue no poço, em seguida colocar 02 gotas de diluente.	15-30 Min	
	Biomérieux		No tubo capilar colocar sangue até marca preta (75 µL), colocar no poço. Em seguida colocar 01 gota de tampão.	30 Min	
Sífilis	WAMA		Colocar 50 µL (02 gotas) de sangue no poço, em seguida colocar 01 gota de diluente.	10-15 Min	Ignorar as letras CMG no cassete.
	Alere		Colocar 20 µL de sangue no Poço, em seguida colocar 04 gotas de diluente.	5-20 Min	
	Bioclin		Coletar sangue até o traço marcado (10 µL) na pipeta plástica, colocar no Poço A . No Poço B colocar 02 gotas de diluente.	15-30 Min	
Hepatite C	Alere		No tubo capilar colher sangue até marca preta (10 µL), em seguida colocar 04 gotas de diluente.	5-20 Min	
HIV	MedTest		Coletar o sangue com a pipeta e dispensar 02 gotas de sangue no poço S . Em seguida colocar 02 gotas do tampão no mesmo poço S .	10-20 Min	
	Bioclin		Coletar sangue até o traço marcado (10 µL). No Poço A colocar sangue e no Poço B 02 gotas de diluente.	15-30 Min	
	Bio-Manguinhos		Coletar 10 µL de sangue, colocar a alça coletora dentro do frasco de eluição, tampar e homogeneizar por 10 segundos. Colocar 02 gotas no poço 1 . Acione o cronômetro e espere 5 minutos. Após esses 5 minutos, colocar 04 gotas de tampão de corrida no poço 2 .	10-25 Min	O tempo de leitura é feito a partir da colocação do diluente.

Referência:

- Teste Rápido Hepatite B – Bioclin

Disponível em: <https://telelab.aids.gov.br/moodle/mod/resource/view.php?id=1014>

Acesso em: 13/08/2018

- Teste Rápido Hepatite B – Biomérieux

Disponível em: <https://telelab.aids.gov.br/moodle/mod/resource/view.php?id=822>

Acesso em: 13/08/2018

- Teste Rápido Sífilis – WAMA

Disponível em: <https://telelab.aids.gov.br/moodle/mod/resource/view.php?id=1015>

Acesso em: 13/08/2018

- Teste Rápido Sífilis – Alere

Disponível em: <https://telelab.aids.gov.br/moodle/mod/resource/view.php?id=838>

Acesso em: 13/08/2018

- Teste Rápido Sífilis – Bioclin

Disponível em: <https://telelab.aids.gov.br/moodle/mod/resource/view.php?id=1078>

Acesso em: 23/09/2019

- Teste Rápido Hepatite C – Alere

Disponível em: <https://telelab.aids.gov.br/moodle/mod/resource/view.php?id=906>

Acesso em: 13/08/2018

- Teste Rápido HIV – MedTeste

Disponível em: <https://telelab.aids.gov.br/moodle/mod/resource/view.php?id=1036>

Acesso em: 13/08/2018

- Teste Rápido HIV – Bioclin

Disponível em: <https://telelab.aids.gov.br/moodle/mod/resource/view.php?id=981>

Acesso em: 13/08/2018

- Teste Rápido HIV – BioManguinhos

Disponível em: <https://telelab.aids.gov.br/moodle/mod/resource/view.php?id=812>

Acesso em: 13/08/2018